

La solution FreeTest



1 Un lecteur de glycémie pour TOUS

Le lecteur de glycémie CareSens **N** vous est fourni gratuitement dans le kit complet « FreeTest CareSens **N** ».



2 Diabète gestationnel

Plage d'hématocrite très large : 20-60%.



3 Prise en main immédiate

Sans codage, date et heure pré-réglées.



3 Pratique

Opérationnel pour les professionnels de santé et pour les patients.



4 Fiable

Validé protocole AFSSAPS.



5 Connexion informatique

250 glycémies en mémoire avec heures et dates.

Comment se procurer le FreeTest CareSens **N**

1 Votre médecin vous établit une ordonnance.

2 Vous apportez l'ordonnance à votre pharmacien.

3 Votre pharmacien vous délivre le kit FreeTest immédiatement ou le commande au 0 800 697 598. Votre kit FreeTest CareSens **N** sera livré dès le lendemain pour toute commande du lundi au vendredi avant 17h.



Kit FreeTest complet :

	ACL	LPPR	Tarif remboursement LPPR au 01/04/10
Kit FreeTest CareSens N comprenant :	9615051		
• 1 lecteur de glycémie CareSens N		GRATUIT	
• 1 boîte de 100 bandelettes CareSens N		1186722	59,93 €
• 1 boîte de 100 lancettes (28G)		1101826	
• 1 stylo autopiqueur		1117454	

Disponibles séparément :

	ACL	LPPR	Tarif remboursement LPPR au 01/04/10
1 boîte de 100 bandelettes CareSens N	9615045	1186722	38,61 €
1 boîte de 200 lancettes VITREX (30G)	4363432	1166100	15,20 €
1 boîte de 200 lancettes VITREX (32G)	4220276	1166100	15,20 €
1 stylo autopiqueur Vitrex Compact	4363426	1117454	13,72 €
1 boîte de 100 autolancettes jetables VITREX Safe Press (26G)	4220253	1186774	10,92 €



1, rue Raoul Follereau - Bussy St Georges
77608 Marne La Vallée cedex 3
Tél. : +33 (0)1 64 77 30 00 - Fax : +33 (0)1 64 77 48 10
info@dinnosante.fr www.dinnosante.fr

Diabète
et AutoSurveillance
Glycémique



FreeTest

CareSens **N**



**SANS
CODAGE**

Convient aux
femmes présentant
un diabète gestationnel

Votre lecteur de glycémie
CareSens **N**
GRATUIT
dans le pack FreeTest

➔ Vous êtes diabétique



Le kit complet **FreeTest** CareSens **N** de DINNO SANTÉ contient un lecteur de glycémie gratuit.




A qui s'adresse-t-il ?

- Aux femmes présentant un diabète gestationnel.
- Aux patients diabétiques ne bénéficiant pas d'une prise en charge à 100%.

Pourquoi cette offre ?

Il est important que les patients diabétiques puissent suivre leur glycémie dans des conditions optimales. C'est pourquoi DINNO SANTÉ propose aujourd'hui le kit complet **FreeTest** CareSens **N** disponible en officine sans surcoût ni pour le patient, ni pour la Sécurité Sociale, ni pour le pharmacien.

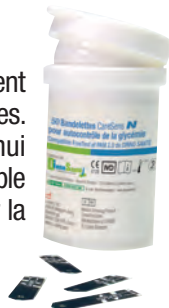

➔ Présentation détaillée



Un lecteur de glycémie CareSens **N**

- **Sans codage** : pas de risque de changement de code par erreur.
- **Opérationnel** pour les professionnels de santé et pour les patients.
- Résultat fiable en **5 secondes**.
- **250 résultats** en mémoire avec la date et l'heure.
- **Préréglé** : heure et date pour une prise en main immédiate.
- **Moyenne** : 14 jours avant et après le repas.
- **Résultat fiable** : validé protocole AFSSAPS.
- **Adapté au diabète gestationnel** : large plage d'hématocrite 20-60%.
- **Connexion informatique** : logiciel et câble disponible gratuitement sur demande.



Des bandelettes réactives

- Petit volume de sang : 0,5µl.
- Forme triangulaire pour faciliter l'aspiration de la goutte de sang.
- Fenêtre de confirmation.
- Aspiration par capillarité.



Stylo autopiqueur « Auto-Lancet® »

- Simplicité d'utilisation.
- Réglage de la profondeur de la piqûre.
- Embase transparente pour pratiquer l'AST (alternance des sites de test), offre la possibilité de prélever le sang ailleurs (base du pouce, avant-bras...). Parlez-en avec votre médecin.

➔ Utilisation simple



- ➔ 1 **Prendre une bandelette.**
Sans codage (aucun réglage préalable nécessaire).




- ➔ 2 **Insérer la bandelette dans le lecteur.**
Le lecteur s'allume automatiquement le symbole demandant la goutte de sang apparaît.



- ➔ 3 **Prélever une goutte de sang à l'aide de l'autopiqueur en utilisant une nouvelle lancette à chaque prélèvement.**
Astuce : avant de prélever une goutte de sang, lavez vos mains à l'eau tiède et séchez-les parfaitement.



- ➔ 4 **Mettre en contact la goutte de sang avec l'extrémité de la bandelette**
Le sang est aspiré automatiquement « et le compte à rebours commence ».

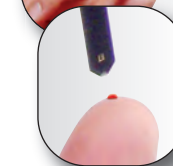

- ➔ 5 **Résultat fiable en 5 secondes.**

